

LAICA®

Электронные детские весы

Модель BF20510



Руководство пользователя

Содержание

1. Введение	2
2. Комплектность	2
3. Описание	3
4. Меры безопасности	3
5. Подготовка к работе	4
6. Эксплуатация	5
7. Технические характеристики	8
8. Гарантийные обязательства	8

1. Введение

Поздравляем Вас! Вы приобрели современное устройство электронные детские весы LAICA, Италия (модель BF20510), в дальнейшем тексте «Весы».

Для обеспечения длительной и безопасной работы весов крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу весов при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования весов.

2. Комплектность

1. Весы	1 шт.
2. Съёмная чаша	1 шт.
3. Планка для измерения роста	1 шт.
4. Резиновые заглушки	4 шт.
5. Защитный винт для фиксации чаши	1 шт.
6. Руководство пользователя	1 шт.

3. Описание

Весы предназначены для контроля веса и роста Вашего ребенка.
Максимальный вес измерения 20 кг
Дискретность измерения 5 г

Функция «**Тарирование**» (TARA) предназначена для автоматического исключения веса пеленки при взвешивании.
Функция «**Стабилизация**» (WEIGHT-BLOCK) определяет точный вес ребенка, когда он лежит беспокойно.
Функция «**Измерение роста**» определяет рост ребенка и отображает результат измерения на ЖК-дисплее.

3.1. Назначение функциональных кнопок:

- «ON/TARA» - кнопка включения весов / включения функции «Тарирование»;
- «OFF» - кнопка выключения весов;
- «UNIT/HOLD» - кнопка выбора единиц измерения веса (килограммы или фунты) / кнопка активации функции «Стабилизация»;
- «MODE» - кнопка включения функции «Ростомер».

4. Меры безопасности

4.1. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием весов! На устройства, эксплуатация которых происходила с нарушением мер предосторожности, гарантия не распространяется.

4.2. Весы являются прибором, требующим аккуратного обращения для обеспечения точности измерений. Не прыгайте на весах!

4.3. Не оставляйте ребенка без присмотра во время взвешивания!

4.4. Не подвергайте весы резким температурным изменениям, избегайте попадания на них влаги, пыли и прямых солнечных лучей.

- 4.5. Не используйте и не храните весы вблизи источников тепла (радиаторы, кухонные плиты, и т.п.).
- 4.6. Протирайте платформу весов слегка влажной тряпкой, а нижнюю часть – сухой тряпкой или салфеткой. Не используйте при чистке весов химические средства.
- 4.7. Устанавливайте весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность, в противном случае показания могут быть неточными или неправильными.
- 4.8. Если Вы используете весы без чаши, следите за тем, чтобы ребенок стоял на весах ровно и спокойно, а его ступни были направлены параллельно друг к другу.
- 4.9. Во время измерения роста ребенок должен быть под наблюдением взрослого.
- 4.10. Устанавливайте батарейки в строгом соответствии с указанной полярностью!

5. Подготовка к работе

- 5.1. Установка батарейки.
- 5.2. Снимите крышку батарейного отсека на нижней части весов.
- 5.3. Вставьте новую батарейку согласно указанной полярности.
- 5.4. Закройте крышку отсека для батарейки.
- 5.5. Установите весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность. Если установить весы на мягкую и шероховатую поверхность (например, ковер, линолеум и т.п.), измерения могут быть неправильными.
- 5.6. Нажмите кнопку «ON» для включения весов. На дисплее сначала отобразится «8888», после чего появится нулевое значение веса:
- 0,00 kg – измерение веса в килограммах;
 - 0.0 lb – измерение веса в фунтах;
- По умолчанию установленной единицей является кг. Для изменения единицы измерения используйте кнопку «UNIT».

5.7. Если весы не работают, проверьте правильность установки батарейки.

Внимание! Для работы весов используется одна батарейка 6LR61, 9В типа «Крона» (в комплект не входит).

6. Эксплуатация

6.1. Выбор единиц измерения

6.1.1. Нажмите кнопку «ON» на весах, чтобы включить их.

6.1.2. Перед тем, как положить ребенка на весы, выберите необходимую единицу измерения путем нажатия кнопки «UNIT».

6.2. Использование весов с чашей

6.2.1. Удалите 4 резиновые заглушки.

6.2.2. Установите чашу на весы и закрепите ее при помощи защитного винта, входящего в комплект поставки.

6.2.3. Нажмите кнопку «ON» для включения весов. На дисплее сначала отобразится «8888», после чего появится нулевое значение веса.

6.2.4. Положите ребенка на весы и дождитесь, пока весы покажут его вес.

6.2.5. Нажмите кнопку «OFF» для выключения весов.

6.3. Использование весов без чаши

6.3.1. Весы можно использовать без чаши, когда ребенок уже может стоять самостоятельно, и вес его меньше 20 кг.

6.3.2. Снимите чашу с весов и вставьте 4 резиновые заглушки.

6.3.3. Нажмите кнопку «ON» для включения весов. На дисплее сначала отобразится «8888», после чего появится нулевое значение веса.

6.3.4. Поставьте ребенка на весы для проведения измерения.

6.4. Измерение веса с функцией «HOLD»

6.4.1. Нажмите кнопку «ON», чтобы включить весы. Весы готовы к использованию, когда на дисплее отобразится нулевое значение веса.

6.4.2. Положите ребенка на весы. Если ребенок двигается, то показания весов могут меняться. Для получения точных данных нажмите кнопку «HOLD».

6.4.3. Пока весы будут производить автоматическое вычисление веса ребенка, исходя из всех полученных данных, цифры и надпись «HOLD» на дисплее будут мигать. Мигание прекратится, и дисплей покажет вес ребенка.

6.5. Измерение веса с функцией «TARA»

6.5.1. Используйте данную функцию при взвешивании ребенка на пеленке.

6.5.2. Нажмите кнопку «ON», чтобы включить весы. Весы готовы к использованию, когда на дисплее отобразится нулевое значение веса.

6.5.3. Положите пеленку на весы.

6.5.4. Нажмите кнопку «TARA».

6.5.5. Подождите, пока на дисплее снова появится нулевое значение веса. Весы готовы к использованию.

6.5.6. Положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка. Функция «TARA» позволяет определять вес ребенка без пеленки.

6.5.7. Снимите ребенка с весов и уберите пеленку.

6.6. Измерение роста с функцией «MODE»

6.6.1. Если ребенок уже может стоять самостоятельно, то при помощи весов можно измерять его рост.

6.6.2. Снимите чашу с весов и вставьте 4 резиновые заглушки.

6.6.3. Нажмите кнопку «ON» для включения весов. На дисплее сначала отобразится «8888», после чего появится нулевое значение веса.

6.6.4. Поставьте ребенка на весы для проведения измерения (рисунок 1).

6.6.5. Нажмите кнопку «MODE». На дисплее появится нулевое значение роста «0,0 см».

6.6.6. Потяните на 2-3 см вверх планку, расположенную над дисплеем, и установите ее согласно рисунку «А».

6.6.7. Двигайте ее медленно вверх до тех пор, пока планка не будет находиться на одном уровне с самой высокой точкой головы, как показано на рисунке «В».

6.6.8. Дисплей покажет рост ребенка в сантиметрах (см). Надпись «HOLD» указывает на то, что данные зафиксированы.

6.6.9. После окончания измерения медленно опустите планку вниз и установите ее в исходное положение.

Внимание! Весы отключаются автоматически через 2 минуты, если их не использовать.

Для отключения также можно использовать кнопку «OFF».

6.7. Обозначения

- «LO» - низкий заряд батарейки.

Необходимо ее заменить.

- «ERR» - вес превышает максимально допустимый.

- «ERR» или «----» и- использование весов не соответствует руководству пользователя.

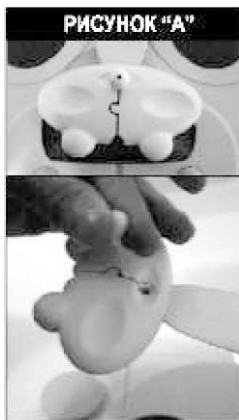


Рисунок 1

7. Технические характеристики

Диапазон взвешивания:	100 г - 20 кг
Диапазон измерения роста:	30см - 150 см
Дискретность измерения веса:	5 г
Дискретность измерения роста:	0,1 см
Питание:	батарея типа 6LR61, 9В типа «Крона» (в комплект не входит)
Условия эксплуатации:	температура от 0°С до + 50°С относительная влажность до 85%
Условия хранения:	температура от 0°С до + 50°С относительная влажность до 85%
Вес:	2,9 кг
Размеры:	28,5х55х16 см

8. Гарантийные обязательства

8.1. Условия гарантии:

8.1.1. Производитель гарантирует высокое качество работы изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

8.1.2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона;
- наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки;
- предъявление неисправного изделия, в полном комплекте, согласно комплектации п.2 настоящего руководства.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте немедленно или после экспертизы в случаях:

- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- изменения или не читаемости заводского серийного номера или наименования модели;
- модификации или ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным;
- наличия дефектов, указывающих на неправильную эксплуатацию изделия.

8.1.3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов;
- химическая коррозия по причине применения некачественных или не соответствующих требованиям данного руководства элементов питания;
- удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия;
- эксплуатация изделия с нарушением Руководства пользователя.

8.1.4. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с Руководством пользователя;
- соблюдение правил и требований безопасности.

8.1.5. Условия гарантии не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек, соединительных шнуров и разъемов.

8.1.6. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

С условиями гарантии согласен

подпись клиента

Адрес сервисного центра:

109263, Москва, Волжский бульвар, д. 50, к.2.

Телефон «Горячей линии»: (499) 130-92-65.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

**Электронные детские весы
LAICA, модель BF20510.**

Дата продажи:

“ _____ ” _____ 201__ г.

Серийный номер:

Штамп продавца:

Подпись клиента:

Для заметок

Поставщик: ООО «Рубиком»
140100 Россия, Московская область,
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5
Тел.:+7 499 1309265

Импортер: ООО «Рубиком»
140100 Россия, Московская область,
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5
Тел.:+7 499 1309265

Производитель: Лайка Интернэшнл
Корп.

2Ф, 207-1, Сек.3, Бейсин Рд., Синдиен
Сити, Тайпей Каунти 231, Тайвань
(Китай)

Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.



Товар сертифицирован

www.rubikom.ru